



カタログNo. **L394**

医療機器認証番号 222AHBZX00017000

家庭用エアマッサージ器

mommy™

PAT.P

脚も心もマッサージ

座りっぱなしや立ちっぱなしの仕事が多く
足がむくみがち・・・

自宅やオフィスで、そんなあなたの
脚を癒します

優しいもみ心地と効果的な刺激は、
血液の循環を高め疲れをとり、コリをほぐします

効果
効能

血行促進 筋肉の疲れをとる

疲労回復 筋肉のコリをほぐす

神経痛、筋肉痛の痛みの緩解



Automatic Air Massager
mommy™

日常生活で起こる・・・いろいろなむくみや疲れ



通勤で足が疲れる
扁平足気味で
疲れやすい



布団に入っても、
足がなかなか温まらず、
寝つけない



冷房のききすぎで
足腰が冷える
一日中同じ姿勢で
足がむくむ



立ちっぱなしで
足が疲れた



夕方、靴がきつくなって
はきにくい





エアマッサージ器「モミー」ですっきり解消しませんか!

血行が促進され循環が良くなると、見た目にも身体的にも健康になり、いきいきしてきます。
この血液やリンパ液の循環は、適度な運動や正しいマッサージによって促進されます。
血液の循環を効果的に促進させる エアマッサージ器「モミー」で、
健康的で身も心も爽快になるマッサージを、ご家庭で手軽にお楽しみください。

つま先から太ももへ向かって順次もみ上げてゆく、 理想的な「求心マッサージ」

▶加圧のしくみ (1~4の動作を繰り返します。)

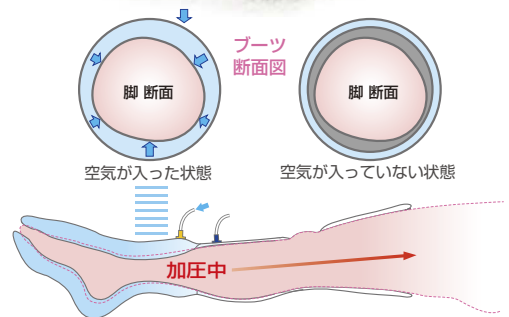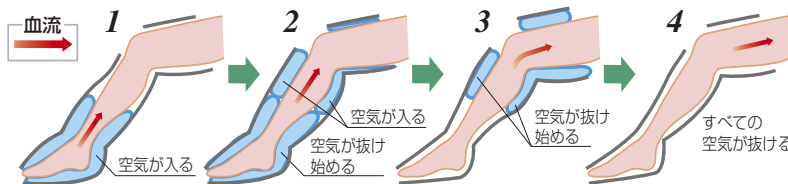

仕様

型 式	MM-1200	
電 源	AC100V(50/60Hz)	
消 費 電 力	15/14W (待機中 1W)	
もみ上げサイクル	60秒(50Hz) / 50秒(60Hz)	
空気圧力調節範囲	4.0~14.7kPa (30~110mmHg)	
定 格 時 間	30分	
寸 法	本 体	縦206 mm × 横200 mm × 奥行200 mm
	ブーツ	太もも〜かかと 725 mm
質 量	本体: 1.9kg	



▲使用上の注意 「モミー」を使用する場合、以下の点に注意してください。

警告

- 次の人は、本機の使用を禁止します。
 1. 医師からマッサージを禁じられている人
(例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈リウ(痛)、急性静脈リウ(痛)、各種皮膚炎および皮膚感染症【皮下組織の炎症を含む】など)
 2. 発症後6ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、もしくはその恐れのある場合。
※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、立ったり歩いたりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。
 3. 装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合。
- 本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。事故の原因になります。

注意

- 次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。症状や病因によっては使用に適さない場合があります。
 1. ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み形医用電気機器を使用している人
 2. 心臓に障害がある人
 3. 高血圧症と診断されている人
 4. 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
 5. 糖尿病の人
 6. 体温38℃以上(有熱期)の人
 7. 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(骨格)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
 8. 妊娠初期の不安定期または、出産直後の人
 9. 安静を必要とする人
 10. 特に身体に異常を感じている人
 11. 皮膚の弱い人
 12. 施療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
 13. 施療部位に骨折、脱ぎゅう、肉ばなれ、ねんざ、創傷のある人
 14. 上記以外の疾患で医師の治療を受けている人
 15. 自覚症状の意思表示ができない人
 16. 本機の使用によりかえって疼痛が増す人
 17. 本機を使用しても症状の改善が見られない人

◆ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、安全にご使用ください。◆本カタログに記載の仕様および内容は2010年11月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご用命は:

販売元 **メド産業株式会社**
 本 社 〒146-0081 東京都大田区仲池上2-9-4
 TEL 03(5748)5521(代表) FAX 03(3754)0258
 大阪支店 〒537-0001 大阪府東淀川区深江北 2-10-10
 TEL 06(6976)3271(代表) FAX 06(6976)3841

製造販売元 **日東工器株式会社**

製品に関する様々な情報をご案内しております。
www.medo.co.jp/
 eメールアドレス: sales@medo.co.jp

(お客様ご相談窓口)メド産業株式会社
 フリーダイヤル **0120-265521**
 受付時間: AM9:00~PM5:00(月~金)



●この印刷物は環境に配慮して、植物性大豆油インキを使用しています。

※本カタログの無断複写を固くお断りします。

10KnetF03-①